

SILVERLINE TM-300 **Operationstisch**



SILVERLINE TM-300 **Mobiler Operationstisch mit** **elektrohydraulischem Antrieb**

THM-Medizintechnik
Hohlweg 24
23617 Stockelsdorf
Tel. + 49 451 / 499 42 56
Fax + 49 451 / 499 41 57

info@thm-medizintechnik.de
www.thm-medizintechnik.de
www.operationstische.eu

Silverline TM-300

**Multifunktionaler elektrohydraulischer
Operationstisch**




Operationstisch mit fünf-
teiliger Lagerfläche, ein-
geteilt in vier Sektionen:
Kopfplatte, Rückenplatte,
Sitzplatte und geteilte
zweifache Beinplatten

Spezialkopflagerung für Ophthalmologie & Gesichtschirurgie



Die Standardkopfplatte kann gegen eine
Kopflagerung mit Doppelgelenk ausgetauscht werden

Tischplatte

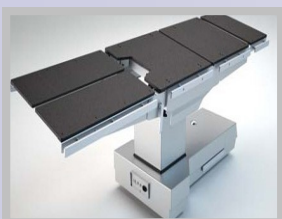

Die röntgenstrahlen-
transparente
Tischplatte und die
lange Ausladung im
Reverse- Mode
ermöglichen einen
guten
C-Bogenzugang

Fahrwerk



Edelstahlverkleidun-
gen rundherum
sorgen für hygieni-
sche Sicherheit und
minimalen
Reinigungsaufwand

Features

Fernbedienung



Fernbedienung für
Tischverstellungen
mit automatischer
Tastensperre
nach 30 Sekunden

Polster



Die abnehmbare Polsterauflage mit
Memoryeffekt ist antistatisch, weich
und flüssigkeitsabweisend mit
Antidekubituseffekt

Mobil & standsicher



Ein integriertes Fahrwerk
sorgt für hohe Flexibilität.
Per Fußpedal ausfahrbare
Standfüße bieten sicheren
Stand.

Silverline TM-300

Multifunktionaler elektrohydraulischer
Operationstisch



Hochwertiger Edelstahl



Leicht zu reinigender
Edelstahl der medizini-
schen Klasse wird für
den gesamten Tisch
verwendet, für
Rahmen, Säulenver-
kleidungen und
Fahrwerk.

Kopf- und Beinplatten



Koppelstellen zur Schnel-
larretierung für Bein- und
Kopfplatten.

Sechs- Segment- Tischplatte



Die fünfteilige Lagerfläche
(Kopfplatte, Rückenplatte,
Sitzplatte und doppelte
Beinplatten) erfüllt die
Bedürfnisse der verschiedenen
Lagerungspositionen im
OP- Alltag

Allgemeine chirurgische Positionen



Standardlagerung



Thoraxchirurgie im
Reversemode




Minimalinvasiv-
chirurgische Lagerung



Urologische- / Gynäko-
logische Lagerung

Ansicht mit Standardzubehör

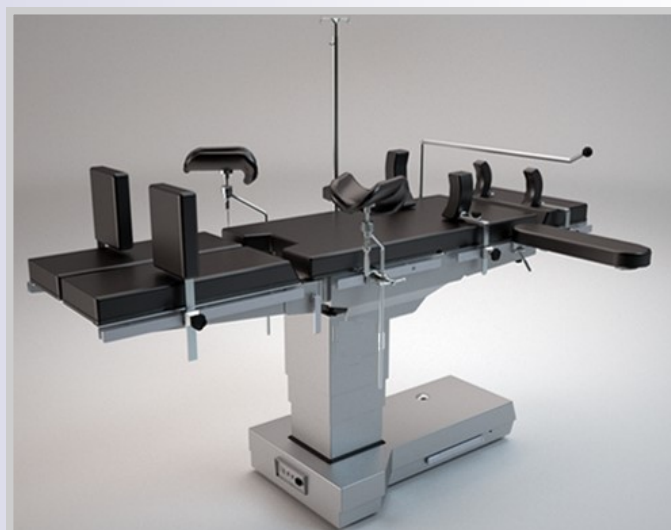

Silverline TM-300

Lagerungsbeispiele



Gynäkologie



Thorax Chirurgie



Gefäßchirurgie



Neurologische Bauchlage



Nierenlagerung



Struma









Spinale Lagerung (Kniende Position)



Neurochirurgische Lagerung

Silverline TM-300

Technische Ansichten

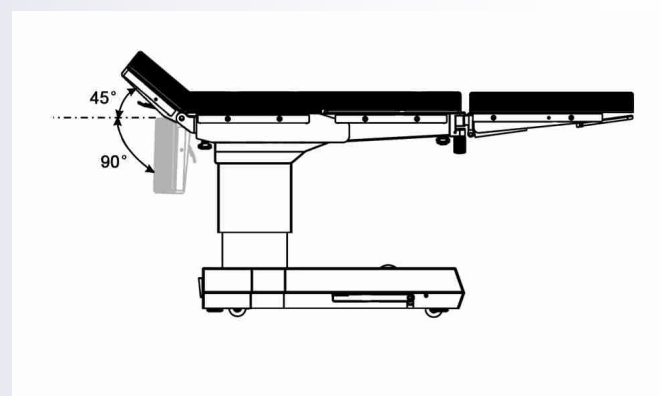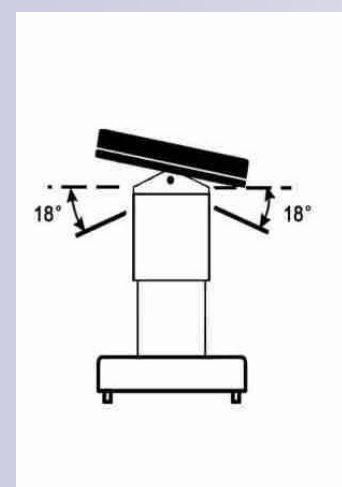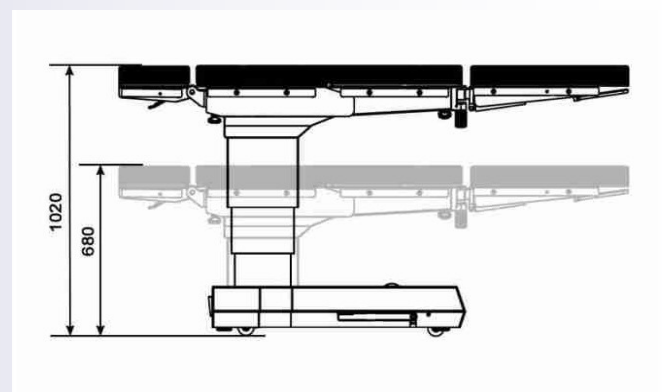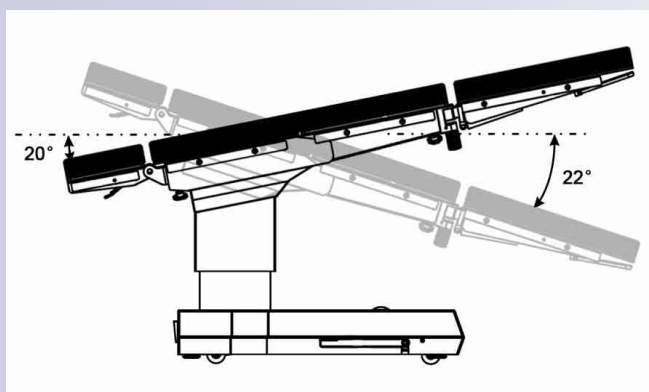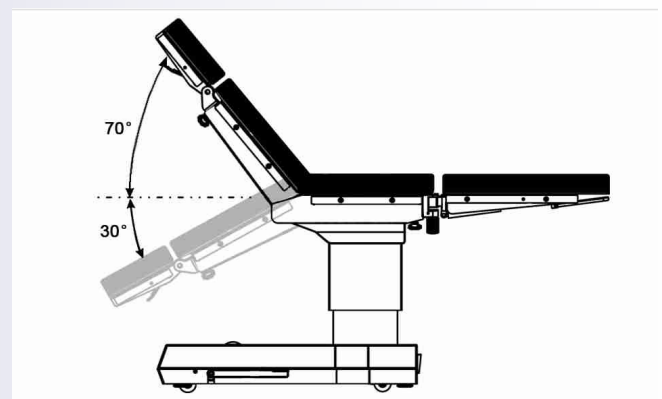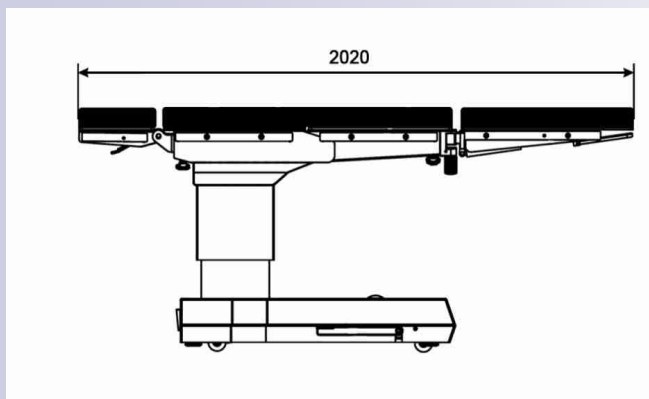

Silverline TM-300

Auszug aus Zubehörangebot



- Armlagerung Horizontalverstellung
- Fixiergurte



- Armlagerung Tiefstellung



- Armlagerung für laterale Position



- Schulterhalter



- Schulterhalter drehbar



- Seitenstützen



- Beinhalter nach Goepel



- Fußplatten



- Beinhalter mit Einhandbedienung



- Kopflagerung mit Doppelgelenk



- Handstütze



- Beach Chair Lagerungsaggregat

Silverline TM-300

Auszug aus Zubehörangebot



■ Sitzplattenverlängerung
(nur TM-310)



■ Hand/ Arm-OP-Tisch



■ Fixiergurt



■ Halterung Neurochirurgie



■ Orthopädische Extension



■ Schädelklemme



■ Befestigungskloben



■ Befestigungskloben rund



■ Radialstellkloben



■ Tropfschale GYN/ URO



■ Röntgenkassettenhalter



■ Armfixierung

Silverline TM-300



Zubehör Auszug aus Zubehörangebot



Hand- OP- Tisch
ohne Stütze



Hand- OP- Tisch
tailliert



Armlagerung mit
Einhandbedienung




Arthroskopie-
Lagerungsaggregat


Technische Daten

SILVERLINE TM- 300	
Länge der Tischplatte	2020 mm
Breite der Tischplatte	520 mm
Gesamtbreite	580 mm
Höhenverstellbereich	680– 1040 mm
Trendelenburg/ Anti-Trendelenburg	+/- 25°
Kantung rechts / links	+/-18°
Rückenplattenverstellung	+ 75° / - 15°
Kopfplattenverstellung	+ 45° / - 90°
Beinplattenverstellung	+ 15° / -90° Spreizung 90°
Max. Patientenbelastung	200 KG
Elektroanschluss	230V/ 50HZ 850VA
Gewicht ohne Zubehör	255 KG
Einbringmaße (min.)	58 cm X 115 cm (B X L)

Serie *Silverline*

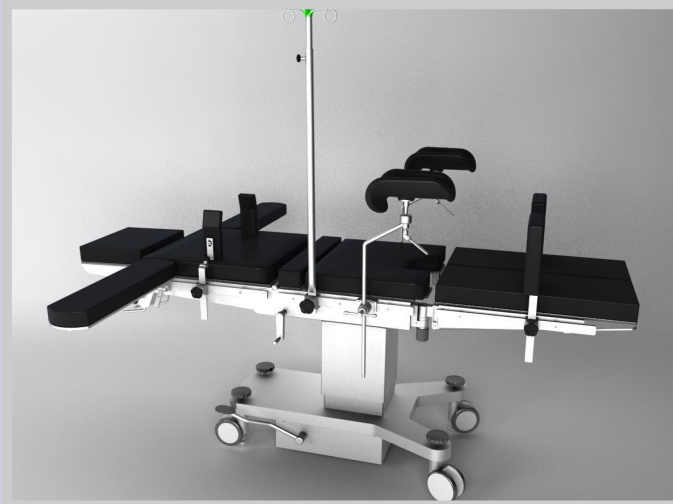

Silverline TM-100

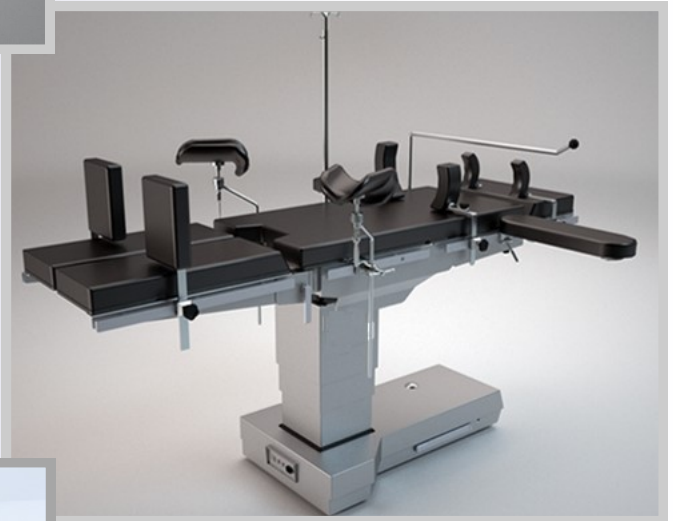

Silverline TM-300



Silverline TM-310